



airScan pro

Wasserdicht | Leicht | mit Doppler-Modus



Dramiński airScan pro

Seien Sie den anderen immer einen Schritt voraus

Leichter, langlebiger und kabelloser
Ultraschallscanner für Tierärzte,
die Rinder und Pferde behandeln.

Untergebracht in einem **wasserdichten
Aluminiumgehäuse** bietet diese hochmoderne
Technologie eine **hervorragende Bildqualität**
und einen präzisen **Doppler-Modus**.

Durch die Möglichkeit zur Anbindung an kabellose
iLens-Brillen ist Ergonomie und Arbeitssicherheit
gewährleistet. Austauschbare Batterien garantieren
genügend Strom für einen ganzen Scan-Tag.


Technische Daten

- Schallkopf:
Rektal linear 4,2-12,5 MHz, Reichweite bis 19 cm
Rektal konvex 3-7 MHz, Reichweite bis 30 cm
- Akkulaufzeit: bis zu 2 Stunden
- Akkuladezeit: bis zu 2 Stunden (5 V, 3 A QC, PD)
- Gewicht: knapp über 600 g inklusive Batterie
- Wasserdicht mit IP65-Schutz
- Kompatibel mit Android/iOS auf Ihrem
Telefon oder Tablet


airScan
pro



Kuh - fötales Herz

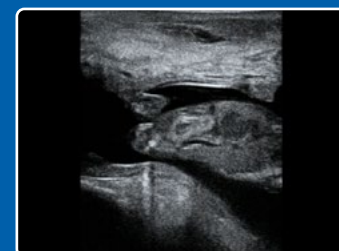

Kuh - Fötus



Kuh - Eierstock



Kuh - Gebärmutter



Pferd - Trächtigkeit

DIAGNOSTISCHE BILDER

Besonderheit

- **Drahtlose Verbindung** zum Mobilgerät oder zur **iLens-Brille**
- Dieselbe App für unsere kabellosen abdominalen Schallköpfe
- **Doppler-Modi** ermöglichen die Identifizierung nicht trächtiger Kühe am 18. Tag nach der künstlichen Befruchtung durch Beurteilung der Durchblutung im Gelbkörper
- Hüftgurt für eine schnelle und sicher Halterung
- **Austauschbare Batterien**
- Aufladen über Standardkabel **USB-C** zu Hause oder im Auto
- **Ergonomisches Bedienfeld** mit Batterieladeanzeige
- Schnelle und einfache Reinigung und Desinfektion

Anwendungsgebiete

	airScan pro Rektal LINEAR	airScan pro Rektal CONVEX
Reproduktion beim Rind	+	+
Reproduktion beim Pferd	+	+
Reproduktion Wiederkäuer		+
Bestimmung des Geschlechts des Fötus	+	+
Blutfluß im Corpus luteum	+	+
Untersuchung der Lunge	+	+
Transabdominale Untersuchung	+	+
Euter und Zitzen	+	
Leberuntersuchung		+
Verdauungstrakt	+	+
Sehendiagnostik	+	


Messung

- Gitter
- Distanz
- Fetale Alterstabelle



Dramiński airScan pro app

Verbinden Sie den airScan pro mit Ihrem Gerät.

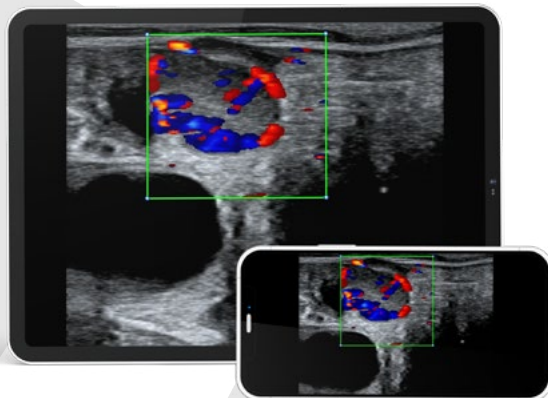

Kuh - aktiver Gelbkörper



Im Standardlieferungsumfang enthalten

- **airScan pro** mit Rektal-Linearem Schallkopf oder mit Rektal-Konvexem Schallkopf
- Hüftgurt für eine schnelle und sichere Halterung
- 2 externe Batterien
- Ladegerät
- Transportkoffer
- Benutzerhandbuch (USB-Stick)





MEHR SEHEN

DRAMIŃSKI S.A.

Wiktora Steffena 21, 11-036 Sząbruk, Polen

 +48 89 675 26 00  ultrasound@draminski.com

Folgen Sie uns:    

www.draminski.com