



Kuh - fötales Herz




Kuh - Fötus



Kuh - Eierstock



Kuh - Gebärmutter

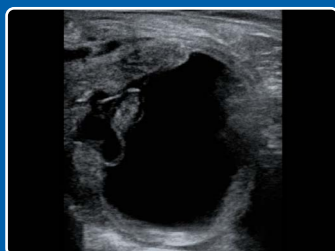

Pferd - Trächtigkeit

DIAGNOSTISCHE BILDER



MEHR SEHEN

DRAMINSKI S.A.

Wiktora Steffena 21, 11-036 Sząbruk, Polen

+48 89 675 26 00 @ sales@draminski.com

Folgen Sie uns:

www.draminski.de

v.1987270426DE

DRAMINSKI
TECHNOLOGY

DRAHTLOSER ULTRASCHALLSCANNER



airScan
pro

Wasserdicht | Leicht | mit Doppler-Modus

www.draminski.de

Dramiński airScan pro

Seien Sie den anderen immer einen Schritt voraus

Leichter, langlebiger und kabelloser Ultraschallscanner für Tierärzte, die Rinder und Pferde behandeln.

Untergebracht in einem **wasserdichten Aluminiumgehäuse** bietet diese hochmoderne Technologie eine **hervorragende Bildqualität** und einen präzisen **Doppler-Modus**.

Durch die Möglichkeit zur Anbindung an kabellose **iLens-Brillen** ist Ergonomie und Arbeitssicherheit gewährleistet. Austauschbare Batterien garantieren genügend Strom für einen ganzen Scan-Tag.

Technische Daten

- **Sonden** (Sonden FEST montiert!):
Rektal linear 4,2-12,5 MHz, Reichweite bis 19 cm
Rektal konvex 3,0-7,0 MHz, Reichweite bis 30 cm
- **Akkulaufzeit:**
Bis zu 2 Stunden Laufzeit mit dem Standardakku
Bis zu 4 Stunden Laufzeit mit dem Power-Akku
- **Akkuladezeit** (5 V, 3 A QC, PD):
Bis zu 2 Stunden – Standardakku
Bis zu 4 Stunden – Power-Akku
- **Gewicht** (mit Sonde und Akku):
Ca. 0,62 kg – Standardakku
Ca. 0,72 kg – Power-Akku
- Wasserdicht mit IP65-Schutz
- Kompatibel mit Android/iOS auf Ihrem Telefon oder Tablet

airScan pro

Besonderheit

- **Dratlose Verbindung** zum Mobilgerät oder zur **iLens-Brille**
- Dieselbe App für unsere kabellosen abdominalen Schallköpfe
- **Doppler-Modi** ermöglichen die Identifizierung nicht trächtiger Kühe am 18. Tag nach der künstlichen Befruchtung durch Beurteilung der Durchblutung im Gelbkörper
- Hüftgurt für eine schnelle und sichere Halterung
- **Austauschbare Batterien**
- Aufladen über Standardkabel **USB-C** zu Hause oder im Auto
- **Ergonomisches Bedienfeld** mit Batterieladeanzeige
- Schnelle und einfache Reinigung und Desinfektion

Anwendungsgebiete

	airScan pro Rektal LINEAR	airScan pro Rektal CONVEX
Reproduktion beim Rind	+	+
Reproduktion beim Pferd	+	+
Reproduktion Wiederkäuer		+
Bestimmung des Geschlechts des Fötus	+	+
Blutfluß im Corpus luteum	+	+
Untersuchung der Lunge	+	+
Transabdominale Untersuchung	+	+
Euter und Zitzen	+	
Leberuntersuchung		+
Verdauungstrakt	+	+
Sehendiagnostik	+	

Messung

- Gitter
- Distanz
- Fetale Alterstabelle




Dramiński airScan pro app
Verbinden Sie den airScan pro mit Ihrem Gerät.



JETZT BEI
Google Play



Laden im
App Store

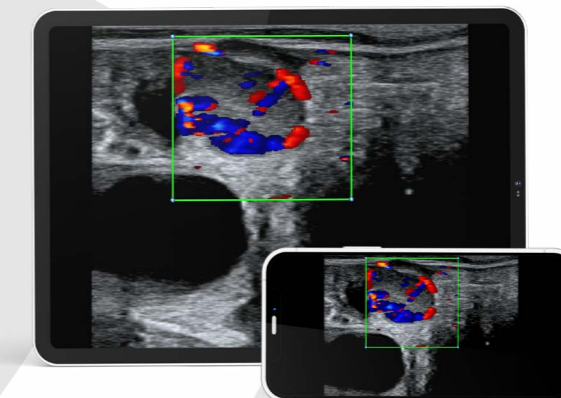

Kuh - aktiver Gelbkörper

Im Standardlieferungsumfang enthalten

- **airScan pro** mit Rektal-Linearem Schallkopf oder mit Rektal-Konvexem Schallkopf
- Hüftgurt für eine schnelle und sichere Halterung
- 2 externe Batterien
- Ladegerät
- Transportkoffer
- Benutzerhandbuch (USB-Stick)

